


電子冷却アルミブロック恒温装置

NEW Cool Stat 5300

－ クールスタット 5300 －

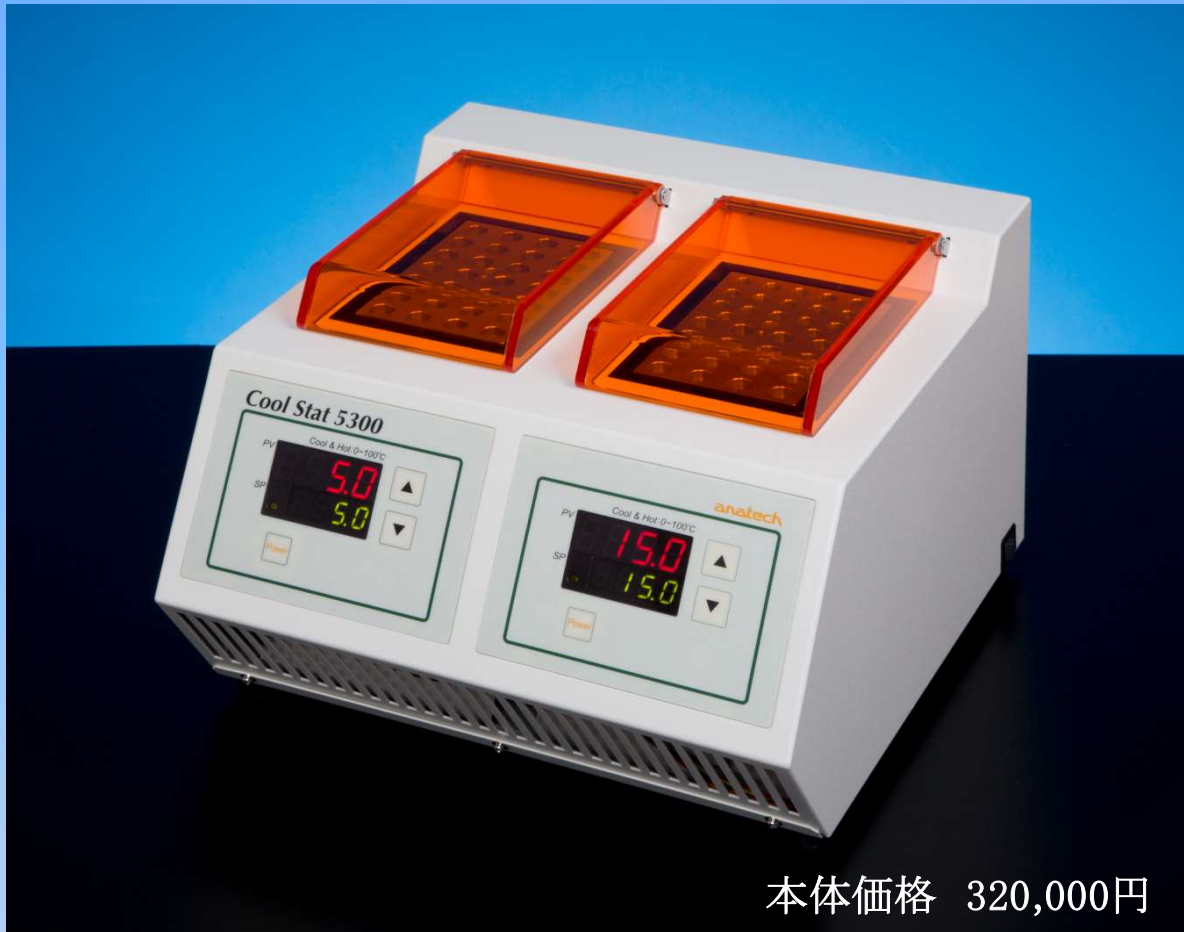

本体価格 320,000円

業界初、2ブロックの独立タイプで温度範囲は 0～100℃


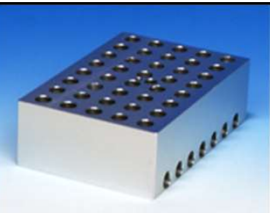
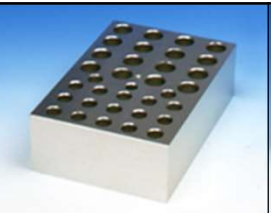
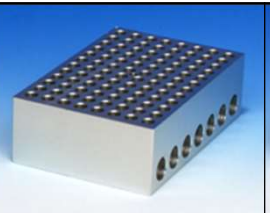
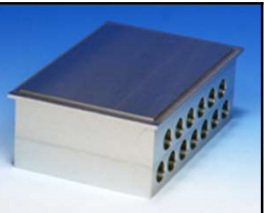
- **各々のブロックで温度設定が可能**
独立した冷却・加温ユニットを搭載しており、個々のユニットで温度設定が可能
- **ワンタッチ操作で設定温度の入力が可能**
ディスプレイに設定温度と測定温度を表示 マニュアルフリーの簡単操作
- **高性能なペルチェ素子を使用**
0～100℃まで、素早く設定温度に到達、直ぐ実験が可能
- **使用目的に合ったアルミブロックの選定**
アルミブロックは使用目的に合わせて、5種類ラインアップ
特注ブロックも1個から製作が可能

anatech

■ 仕様

商 品 名	クールスタット 5300		
品 番	5300 - 00		
ブ ロ ッ ク 数	2 個		
温 度 設 定 範 囲	0 ~ 100°C		
精 度	± 0.2°C		
冷 却 ・ 加 温 素 子	サーモモジュール (ペルチェ素子)		
昇 温 速 度	5 から 100°C まで 約15分		
降 温 速 度	100°C から 5°C まで 約20分		
使 用 ブ ロ ッ ク	アルミニウム製 (表面アルマイト処理済み) 114 × 76 × 35 (H) mm		
温 度 セ ン サ ー	白金側温抵抗体 Pt100Ω		
安 全 機 構	過電圧・過電流保護、温度センサー断線及び短絡表示(エラー表示)をし昇温機能停止、110°C以上の昇温防止回路、約130°C以上の過昇温防止用温度ヒューズ内臓		
本 体 寸 法	300 × 330 × 200 (H) mm	重量	9.5kg
電 源	AC100V (±10%) 50/60Hz 消費電力 600VA		
価 格 (本 体 の み)	¥320,000.		

■ アルミブロックの種類

				
品番: 5000 - 01	品番: 5000 - 02	品番: 5000 - 03	品番: 5000 - 08	品番: 5000 - 07
1.5ml用	0.5ml用	1.5ml/0.5ml用	0.2ml用	96穴組織培養用
28穴	40穴	16穴/18穴	96穴	フラット
¥27,000.	¥33,500.	¥35,000.	¥35,000.	¥36,000.

■ クールスタットシリーズ

		
クールスタット 5000	クールスタット 5100	クールスタット 5200
¥220,000.	¥180,000.	¥280,000.
ヒートカバー方式とプログラム機能付 ハイグレードモデル	シンプルな構成のスタンダード製品	左側は0~100°Cに温度設定 右側は室温+5~100°Cに温度設定

- 上記クールスタットシリーズの詳細仕様に関しては、専用カタログがありますので、お問い合わせ下さい。
- カタログに記載している価格には消費税は含まれておりません。 ● 本仕様、外観などは改良のため、予告なしに変更する場合があります。

anatech
アナテック株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目31番15号 和光湯島ビル
TEL : 03-3812-8701 FAX : 03-3818-9167
URL : <http://www.anatech.co.jp/>
e-mail : info@anatech.co.jp

代理店