



## サブマリンアガロース電気泳動装置 3045, 3030, 3035, 3040


- アガロースゲルを支持体とした電気泳動装置でDNA, RNAの分離・分析用として最適です。
- トランスファートレイは、UV透過用アクリル樹脂を採用しております。コームはコームホルダーにセットしてコームの深さを調整する事が出来ます。
- コームホルダーのセットはトレイの端と中心部の2ヶ所が可能です。多検体による実験を行う場合は、コームホルダーをトレイの端と中心にセットして、ゲル作製を行って下さい。
- ペリスタリテックポンプを使って、陽極槽と陰極槽のバッファーを循環が出来る構造になっております(3045は不可)。
- トレイの両端にポリエステル粘着テープを使ってテーピングします。液漏れを防ぎます。

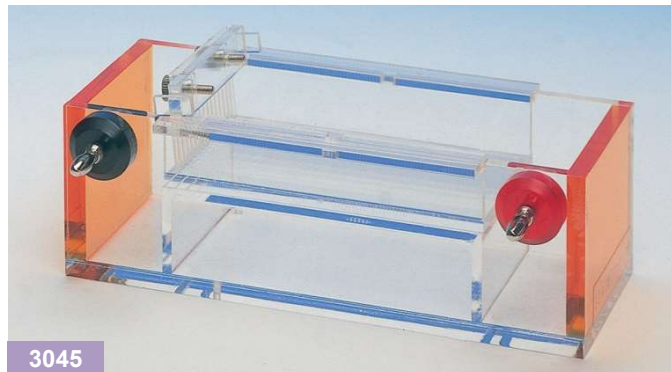

3045

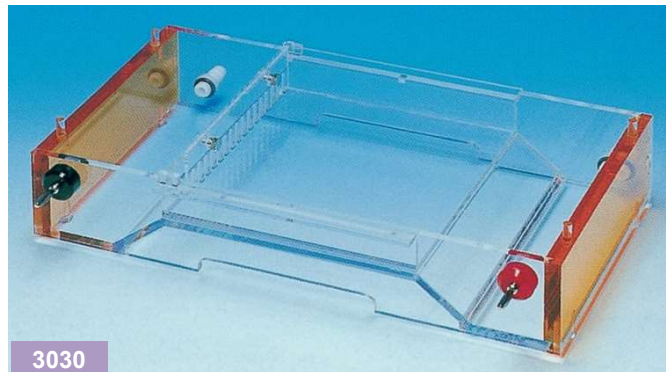

3030

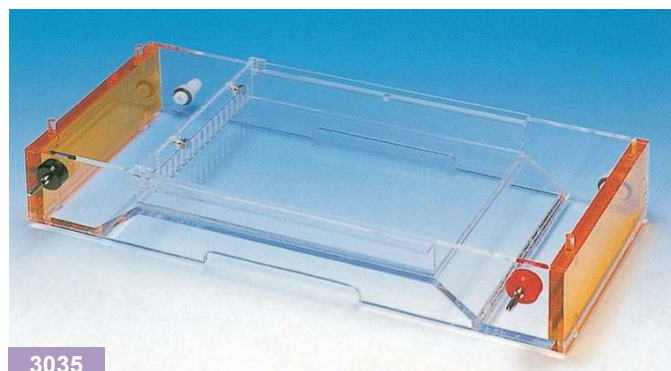

3035



3040

型式	3045	3030	3035	3040
商品番号	3045-00	3030-00	3035-00	3040-00
本体	1個	1個	1個	1個
トランスファートレイサイズ	60×90Lmm	150×150Lmm	150×200Lmm	200×250Lmm
コーム	15検体 厚さ1mm	17検体 厚さ1mm	17検体 厚さ1mm	19検体 厚さ1mm
コーム	8検体 厚さ1mm	17検体 厚さ2mm	17検体 厚さ2mm	19検体 厚さ2mm
コームホルダー	1個	2個	2個	2個
ポリエステル粘着テープ(3本)	1袋	1袋	1袋	1袋
出力リード線(赤・黒)	1組	1組	1組	1組
寸法	160×77×65Hmm	310×160×60Hmm	360×160×60Hmm	460×210×80Hmm
価格	¥47,200	¥73,000	¥81,000	¥86,000

## サザンロッター 3978

¥34,000. 商品番号: 3978-00



- サザン槽と付属のパットの組み合わせにより、ブロットイングが簡単にできます。
- サザン槽は傾いたり、ひっかかる事も無くブロットイングが行えます。
- 4本の支柱は透明アクリル製(丸棒)を使用しております。
- 電気は一切使用せず、安全でオーバーナイトも可能です。

### 仕様

有効ゲルサイズ	200W×200D(最大)
サザンパット	200W×200D×厚さ20mm
寸法	220W×220D×50Hmm