

セミドライロッター 3977

¥92,000. 商品番号:3977-00



- セミドライ式ブロッキング装置です。短時間で転写が可能です。
- 陽極側にはカーボン、陰極側にはステンレスプレートを使用しています。
- スタンダードスラブゲルからミニタイプゲルまで使用が可能です。
- 適応可能な分子量範囲は10～130kDaです。

仕様

電極サイズ	200W×200Dmm
定電圧	10～15V、40～60分
定電流	ゲル1cm ² あたり0.8～1.0mAで45～60分 ゲル1cm ² あたり2.0mAの場合約45分
寸法	250W×250D×50Hmm 1,800g

セミドライロッター 3975

¥175,000. 商品番号:3975-00



- セミドライ式ブロッキング装置です。短時間で転写が可能です。
- 陽極側には白金プレート、陰極側にはステンレスプレートを使用しています。
- スタンダードスラブゲルからミニタイプゲルまで使用が可能です。
- 適応可能な分子量範囲は10～130kDaです。

仕様

電極サイズ	185W×185Dmm
定電圧	5～15V、30～60分
定電流	ゲル1cm ² あたり0.8～1.0mAで45～60分 ゲル1cm ² あたり2.0mAの場合約45分
寸法	210W×230D×35Hmm 1,400g

ゲルスポットカッター

各 ¥58,000.




- CBB染色、銀染色など可視染色したポリアクリルアミドゲルからスポットの切り出しが簡単に行えます。
- 同じように切り出すことが出来るので、その後のゲル内消化の作業などを同じように行う事が出来ます。
- PVDF膜のカッティングも可能です。

付属品	商品名	数量	単価
3090-24	ゲルスポットカッター 2.4φ	1	¥58,000
3090-21	ゲルスポットカッター 2.1φ	1	¥58,000
3090-18	ゲルスポットカッター 1.8φ	1	¥58,000
3090-12	ゲルスポットカッター 1.2φ	1	¥58,000

※ ゲルスポットカッターはフルオロホレスター® 3000に使用することは出来ません。

シェーカー

各 ¥128,000.

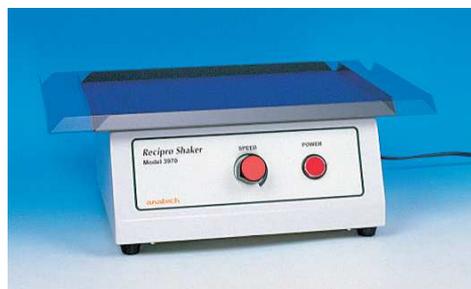

レシプロシェーカー3970

(商品番号:3970-00)
テーブルは左右に動作します。
振とう数:14～140回/分



シーソーシェーカー3960

(商品番号:3960-00)
テーブルは上下に動作します。
振とう数:3～30回/分



ロータリーシェーカー3950

(商品番号:3950-00)
テーブルは円形状に動作します。
振とう数:14～140回/分

共通仕様

テーブル寸法	220×319×15H mm	入力	AC100V 50/60Hz
搭載重量	3.0 kg	消費電力	3970 及び 3950 : 25VA 3960 : 60VA
本体寸法 及び 重量	225×254×130H mm 4.0kg	価格	各 ¥118,000